

Для того, чтобы медицинские организации, уполномоченные на проведение скрининговых исследований на гемоконтактные инфекции имели возможность работать с направлениями в Промед, необходимо произвести следующие настройки в структуре ЛПУ:

- В группе отделений с типом Параклиника необходимо создать отделение лабораторной диагностики и добавить на отделение службу с типом *Лаборатория* (Рис.1, (Рис.2))

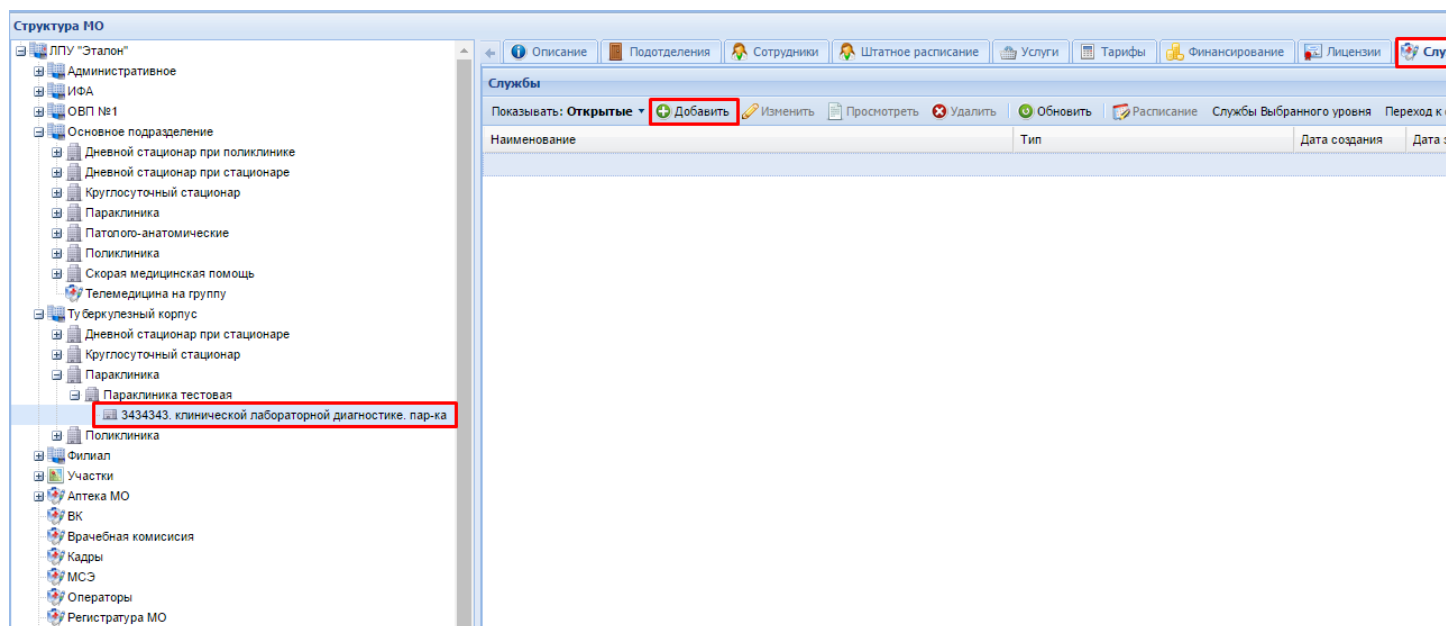


Рис. 1: Добавление службы кдл в структуре ЛПУ

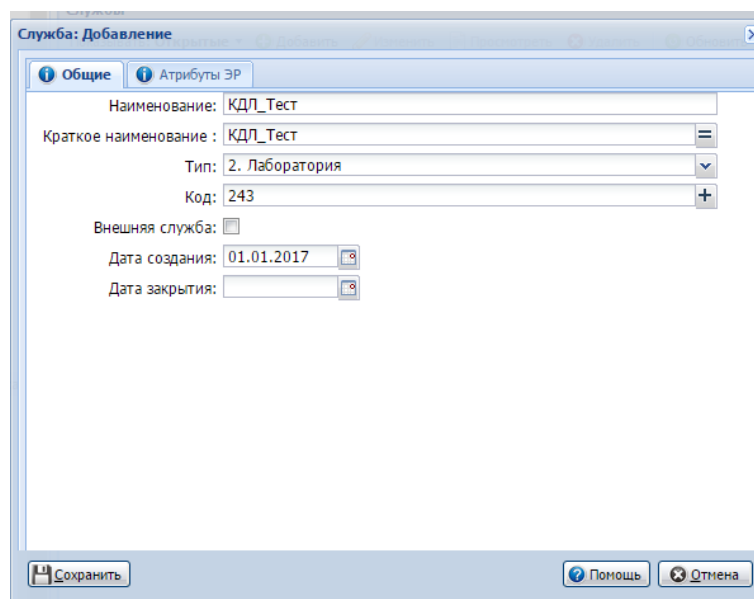


Рис. 2: Заполнение формы Служба: Добавление

- Далее необходимо устроить на службу сотрудников, для этого на службе на вкладке *Сотрудники* нужно нажать кнопку **Добавить** (Рис.3). Откроется форма *Сотрудник:Добавление*, в которой необходимо выбрать сотрудника и указать дату начала работы сотрудника на службе. (Рис.4)
- Для корректного отображения услуг при работе с исследованиями необходимо произвести настройки анализатора. На уровне службы на вкладке *Анализаторы* по умолчанию отображается анализатор Ручные методики, на данный анализатор можно добавить исследования. Для этого необходимо выбрать анализатор и на панели Тесты и исследования нажать кнопку **Добавить исследование** (Рис.5)

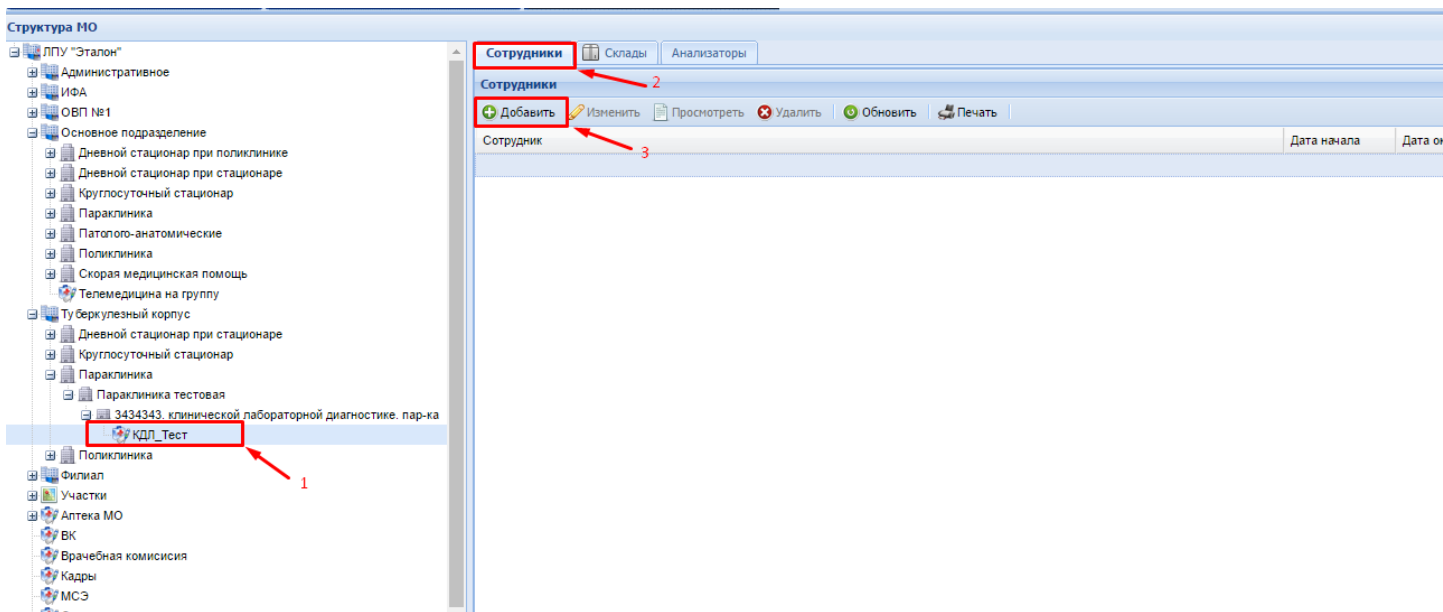


Рис. 3: Добавление сотрудника на службу

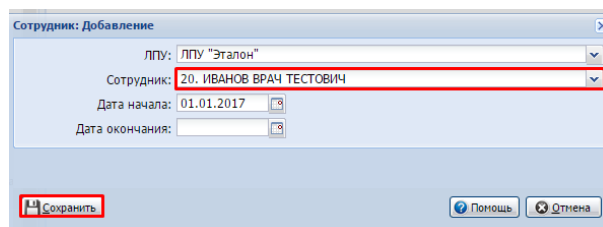


Рис. 4: Заполнение формы Сотрудник: Добавление

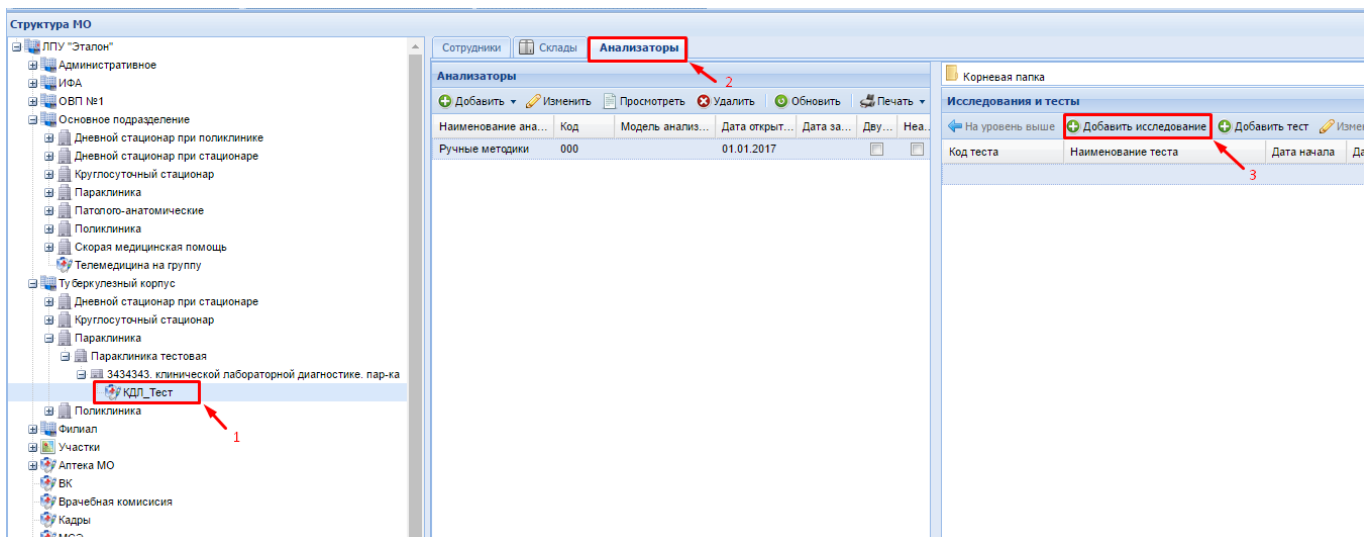


Рис. 5: Добавление исследования на анализатор

- Откроется форма Исследование анализатора: Добавление, в которой необходимо указать категорию, код и дату начала действия услуги, после внесения изменений необходимо нажать кнопку **Сохранить** Рассмотрим на примере добавления исследования A26.06.048.004. (Рис.6, Рис.7)
- После того как исследование добавлено, в него необходимо добавить тесты. Это возможно сделать, если дважды щелкнуть ЛКМ по исследованию - отобразится уровень исследования, после чего нужно нажать кнопку **Добавить тест** (Рис.8)
- Откроется форма **Тест анализатора: Добавление**, в которой необходимо указать категорию и код услу-

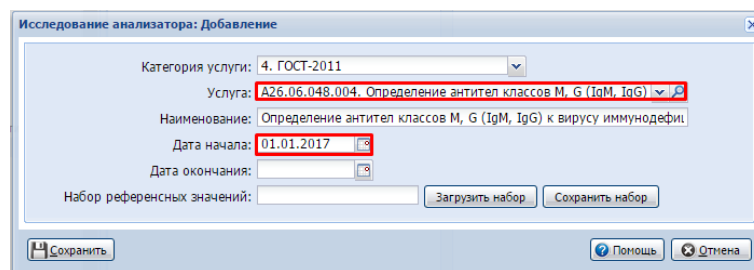


Рис. 6: Добавление исследования на анализатор

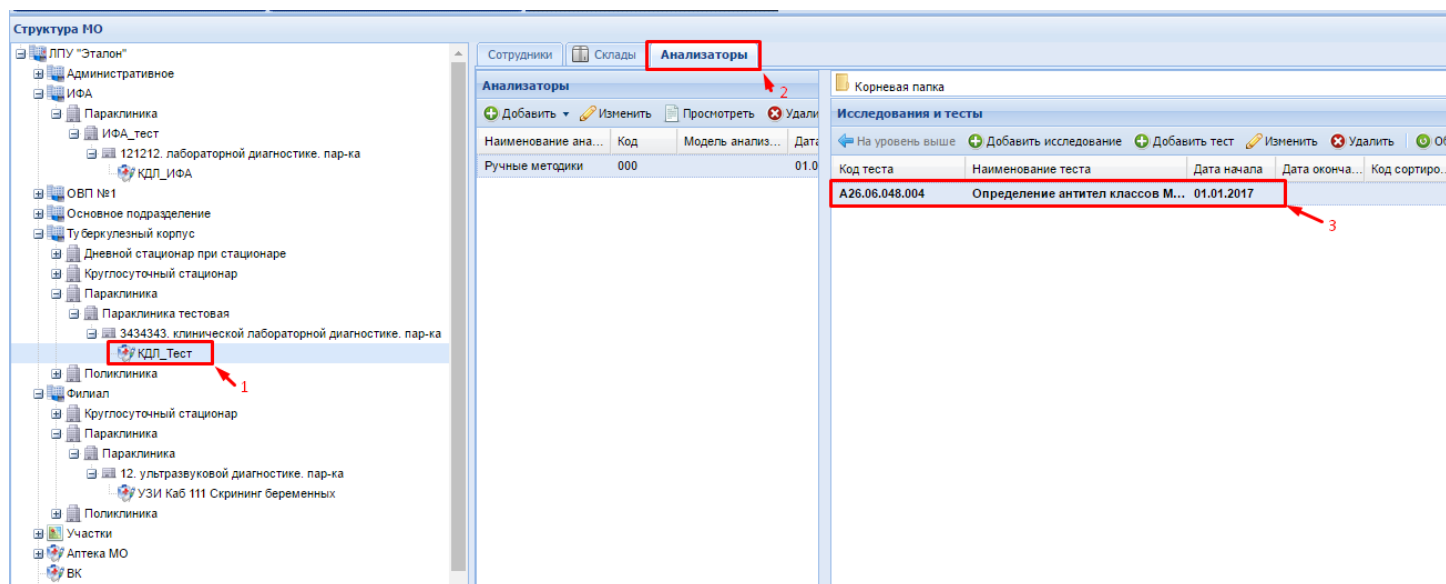


Рис. 7: Добавленное исследование на анализаторе

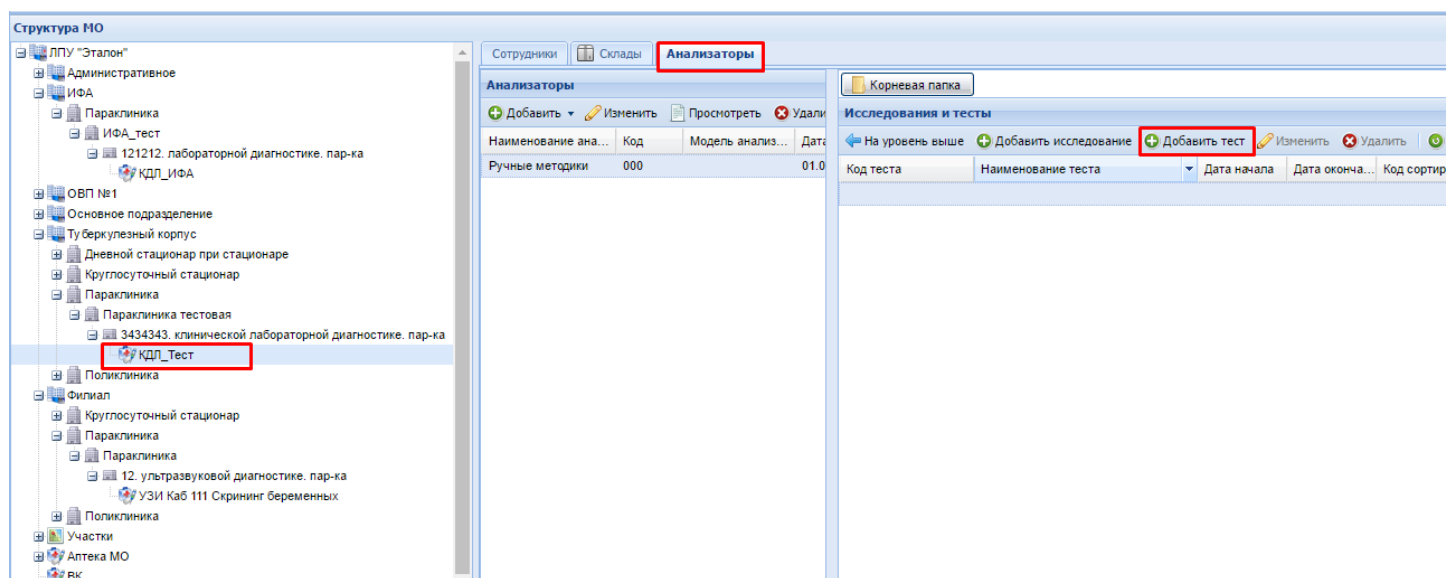


Рис. 8: Добавление теста в исследование

ги, а также тип теста. Если тест качественный, то на форме *Варианты ответов* необходимо нажать кнопку **Добавить**. Откроется форма добавления варианта ответа, в которую необходимо ввести текст (положительный и отрицательный в данном случае) (Рис.9, Рис.10)

Необходимо обратить внимание, что исследование A26.06.048.004 состоит из двух качественных тестов A26.06.048 и A26.06.049, а исследования A26.06.036 и A26.06.041 будут содержать в себе по одному исследованию с тем же кодом. В случае, если в структуре ЛПУ уже создана лабораторная служба, создавать

новую не обязательно, достаточно произвести соответствующие настройки для существующей.

Тест анализатора: Добавление

Категория услуги: 4. ГОСТ-2011

Услуга: A26.06.048. Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к ви

Мнемоника:

Тип теста: 2. Качественный

Дата начала: 01.01.2017

Дата окончания:

Приоритет:

Варианты ответов (для качественных)

+ Добавить | Изменить | Удалить | Обновить

Наименование

Сохранить | Помощь

Рис. 9: Добавление теста в исследование

Вариант ответа

Вариант ответа: положительный

Сохранить | Помощь | Отмена

Рис. 10: Добавление вариантов ответа для качественных тестов